

Waschbare Bettschutzauflage

Washable Bed Pad


Die waschbare Bettschutzauflage schützt sowohl Patient, als auch die Matratze.

Die waschbare Bettschutzauflage kann gewaschen und mehrmals wiederverwendet werden.

The washable bed pad protects both, patient and the mattress.

Washable bed pad can be washed and reused many times.

Größe/Size	85 x 90 cm
Zusammensetzung/ Composition	• 80% Polyester • 20% Polyurethan
Aufnahmekapazität/ Absorption capacity	>3000 ml/m ²
Waschbar bis zu/ Washable up to	

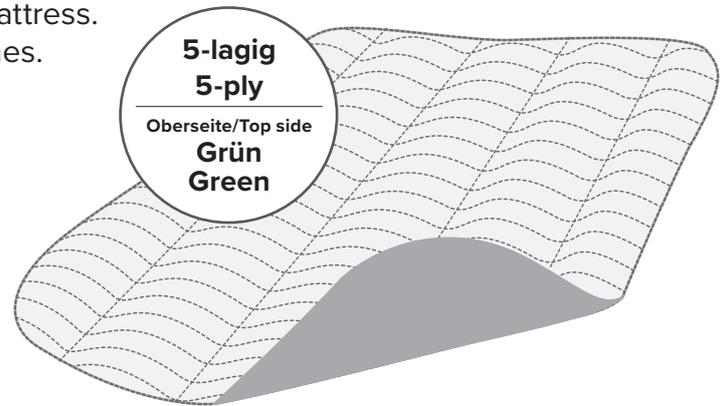

Die oberste angeraute Schicht(grün) der waschbaren Bettschutzauflage ist aus hochtechnischen Fäden hergestellt, die unerwünschte Flüssigkeit auf die unteren Schichten sehr schnell überträgt, so dass die obere Schicht innerhalb von wenigen Minuten trocknet und die liegende Person sich nicht unwohl fühlt. Die Flüssigkeit wird zwischen den unteren Schichten eingeschlossen und das Eindringen in die Matratze vermieden. Die unterste Schicht ist flüssigkeitsundurchlässig.

The top roughened layer(green) of washable bed pad is made of highly technical yarns that transfer the unwanted liquid to below layers very quickly, leaving the top layer dry within a few minutes so that the person lying on it does not feel uncomfortable. The liquid is locked between the below layers and the penetration to the mattress is avoided. The lowest layer is liquid impermeable.

Wo verwendet man die waschbare Bettschutzauflage?

Weitgehend immobile bettlägerige Patienten, mit hohem Risiko eines Dekubitus, vorgeschädigter Haut, sezernierenden Wunden oder bestehender Inkontinenz. Es sind keine Kontraindikationen bekannt.

- Ideal für bettlägerige Patienten
- Pflegeheime, Hotels, Schulen, Vorschulen
- Wochenbettpflege, Babypflege
- Brutkasten, Wiege, Kinder- und Standardbett
- Kinder mit Bettnässproblemen

Where to use washable Bed Pad?

Largely immobile bedridden patients at high risk of decubitus, previously damaged skin, secreting wounds or existing incontinence. There are no known contraindications.


- Ideal for bedridden patients
- Rest homes, hotels, schools, pre-schools
- Maternity care, baby care
- Incubator, cradle, child bed and standard bed
- Children with bed wetting problems

Wie pflegt man die waschbare Bettschutzauflage

- Waschbar bei 95 °C
- Nicht bügeln
- Geeignet für Wäschetrockner

How to use washable Bed Pad

- Washable at 95 °C
- Do not iron
- Suitable for tumble dry

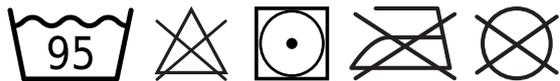

Geprüft auf Schadstoffe.
www.oeko-tex.com/standard100

Made in Turkey Rev.03/10/21



Medizinprodukte Klasse I
Medical Devices class I